

Tack för din medverkan!



PRIC-studien

Har du frågor gällande:

- Inbjudan
- Registreringen
- Frågeenkäten
- Provtagningskittet

Kontakta: pric@direkttest.se

Om ett år igen skickas ett nytt kitt till samma adress.
Vid adressändring kontakta oss gärna (endast telefon)
Telefon: 090-15 48 30

Övriga frågor om:

- Provtagningen
- Information om PRIC-studien

Kontakta: pric-studien@uu.se

Besöka gärna vår hemsida för mer information:
<https://www.uu.se/forskning/pric>

I denna försändelse bifogas ett provtagningspaket för PRIC-studien som du valt att medverka i.

Provtagningspaketet innehåller allt material som behövs för att ta ditt blodprov samt en instruktion hur du tar ditt prov.

Instruktion för provtagning

- 1**
- Läs igenom hela instruktionen innan du börjar!
 - Öppna alla förpackningarna i paketet.
 - Placera ut allt material på ett torrt bord.



a)
Alkoholservett
(+1 st i reserv)



b)
Lansett
(+1 st i reserv)



c)
Provtagningskort
i skyddshölje



d)
Kompress



e)
Plåster
(+1 st i reserv)

2




Tvätta händerna med tvål och **varmt** vatten, och varm händerna ytterligare genom att gnugga dem mot varandra.

Torka med alkoholservetten (a) där du ämnar sticka på lång- eller ringfinger. Låt torka!

Vrid av den smala blå toppen på lansetten (b).

3

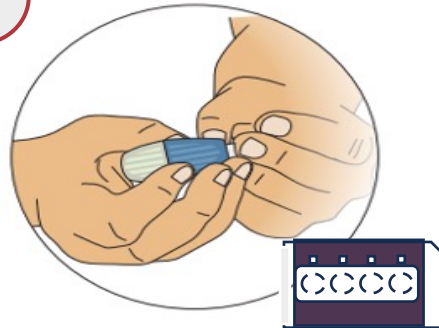


Ta ut provtagningskortet (c) ur skyddshöljet (spara höljet) och placera framför dig på en torr plan yta.

Håll runt nagelroten på stick-fingret och tryck upp blod i fingertoppen.

Greppa den räfflade delen av lansetten, och tryck bestämt mot stickområdet, så skjuts lansetten ut automatiskt.

4

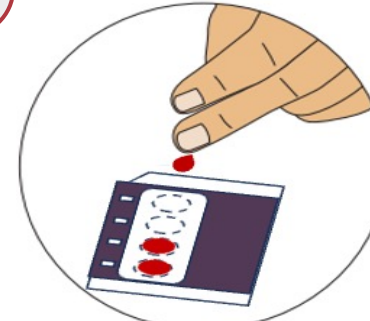


Torka bort den första bloddroppen med kompressen (d).

Håll fingret nedåt ovanför provtagningskortet (c) med cirkarna som riktmärke. Massera varsamt ner mot fingertoppen fram en stor bloddroppe på kortet, låt det ta tid.

Upprepa en droppe för varje cirkel, fyll så många du kan. Blod utanför cirkarna är ok.

5

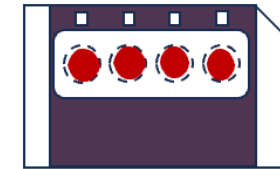

Torka fingret och sätt på plåstret (e). Lägg provtagningskortet på en **torr** plats och lufttorka i ca 3 timmar.

Lägg kortet i skyddshöljet och sedan i det förfrankerade returkuvertet och posta på brevlådan.

